

MANUÁL K POUŽITÍ VYVOLÁVACÍCH SYSTÉMŮ NEKLEPAT CZ


(verze PRINT + LITE)

Ovládání vyvolávacího systému

Instalaci vyvolávacího systému zajišťuje servisní technik na základě předem domluveného termínu montáže.

- **NEINTEGROVANÁ VERZE – V PROGRAMU FRONTA PACIENTŮ**

V případě, že lékař používá náš program Fronta pacientů může pacienta vyvolat do ordinace pomocí ikony tlampače (viz obrázek). Poté se mu zobrazí dialog s vyvolávacími údaji pacienta. Po stisknutí klávesy „Vyvolat pacienta“ bude pacient vyvolán pomocí obrazovky umístěné v čekárně.

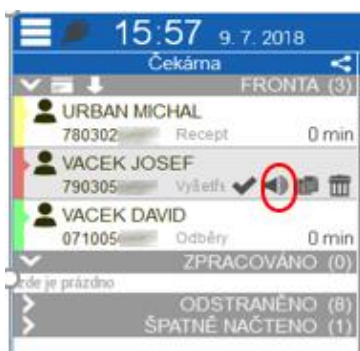


- **INTEGROVANÁ VERZE – PŘI POUŽÍVÁNÍ AMBULANTNÍHO PROGRAMU OD SPOLEČNOSTI COMPUGROUP MEDICAL ČR (PC DOKTOR, PC DENT, MEDICUS, AMICUS)**

Vyvolat pacienta můžete přímo z Vašeho ambulantního programu. Po stisknutí ikonky tlampače se Vám zobrazí vyvolávací dialog s údaji, které budou na obrazovce vyvolávacího systému (obrázek níže).

Ikona tlampače v AIS MEDICUS



Tlačítko pro vyvolání pacienta v AIS PC DOKTOR/PC DENT

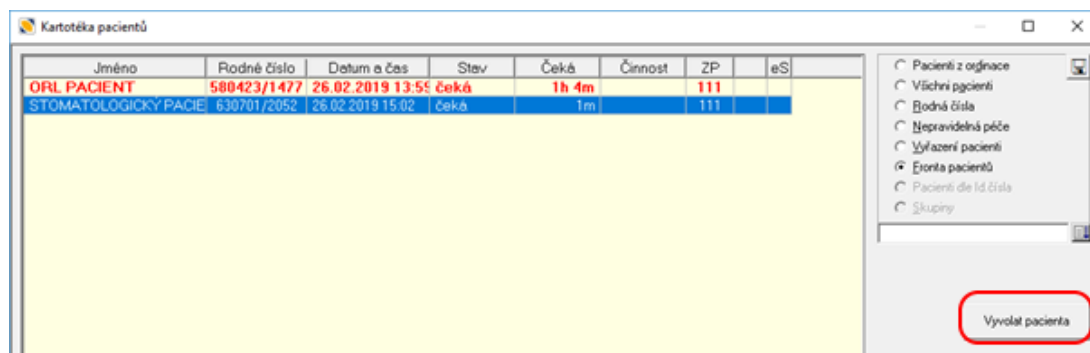

➤ DIALOG „VYVOLAT PACIENTA“ – STEJNÝ V INTEGROVANÉ I NEINTEGROVANÉ VERZI

Vyvolat pacienta [gear] [close]

Ordinace (Rentgen)

Jméno ○
 [eye]

Příjmení

Číslo lístku ●

Neklepat.cz © eHOUSE SERVICES, s.r.o.

Vyvolávací dialog v případě použití VS PRINT

Vyvolat pacienta [gear] [close]

Ordinace (Rentgen)

Jméno ●
 [eye]

Příjmení

Číslo lístku ○

Neklepat.cz © eHOUSE SERVICES, s.r.o.

Vyvolávací dialog v případě použití VS LITE

Pzn. v případě Vyvolávacího systému PRINT můžete přejít i na vyvolání pacienta jménem.

➤ NASTAVENÍ PRO POTŘEBY VYVOLÁVACÍHO SYSTÉMU LITE A PRINT

Vyvolat pacienta [gear] [close] **NASTAVENÍ VYVOLÁVÁNÍ**

Ordinace (Rentgen)

Nastavení vyvolávání [close]

Adresa vyvolávacího systému

Id obrazovky (nevyplňujte, pokud jej neznáte)

Barva

Zobrazení informací o pacientovi

Jméno
 neuvádět skryt skryt částečně odkrýt

Příjmení
 neuvádět skryt skryt částečně odkrýt

Text před číslem lístku
 Vyvolávat číslem lístku

Neklepat.cz © eHOUSE SERVICES, s.r.o.


➤ NASTAVENÍ ČÍSELNÝCH ŘAD

Toto nastavení naleznete v programu Fronta pacientů po rozkliknutí nabídky „Nastavení číselných řad“.


Tato funkce slouží pro nastavení generování více číselných řad pro jednotlivé úkony/ordinace. Pacient tak získává přehled, kolik pacientů je před ním na daný úkon/ordinaci.

➤ NASTAVENÍ ČÍSLOVÁNÍ

Toto nastavení naleznete v programu Fronta pacientů po rozkliknutí nabídky „Nastavení čteček“.

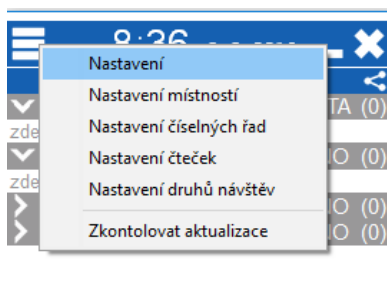

Poté vyberete záložku „Číslování“

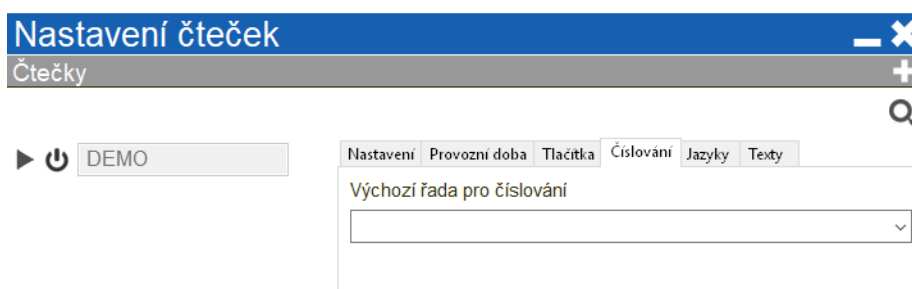

V případě, že necháte pole prázdné budou se lístky tisknout sekvenčně (1,2,3,4,5,..). Lze ale také nastavit číslování náhodné (3,5,9,8,..).

➤ VYVOLÁVACÍ OBRAZOVKA

Po stisknutí možnosti „Vyvolat“ se zobrazí na obrazovce jméno (obrázek 2) nebo číslo pacienta (obrázek 1):

Obrázek 1



Obrázek 2



- [Možnosti rozvržení obrazovky vyvolávacího systém + nastavení doprovodného obsahu](#)

Všechny potřebné informace ohledně nastavení obrazovky vyvolávacího systému naleznete v samostatném manuálu „Návod na nastavení obrazovky VS“.

Manipulace s tiskárnou pořadových štítků

Pomocí klíče, který obdržíte při montáži zařízení, odemknete spodní část čtečky s tiskárnou a vyměníte papírovou ruličku. V případě jakýchkoli poruch tiskárny prosím kontaktujte našeho servisního technika na tel.: 733 344 907.



TISKÁRNA POŘADOVÝCH LÍSTKŮ