

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

PŘIPOJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM LAN

Zařízení připojte k ethernetové síti prostřednictvím konektoru LAN.


INSTALACE SOFTWARE FRONTY

- Z dodané webové adresy stáhněte instalační balíček programu NEKLEPAT CZ.
<https://update.r1-cz.storage.forpsicloud.cz/NeklepatSetup.exe>
- Na primárním počítači, kde je fronta, je nutné nejprve nainstalovat databázový server/databázi Firebird.
- Aktivujte instalační soubor a proveďte instalaci programu dle instalačního průvodce. (Instalaci je nutné provádět pod oprávněním správce. Budete-li při instalaci vyzváni k přidělení oprávnění programu provádět změny ve Vašem počítači, potvrďte tuto možnost ANO.)
- Po dokončení instalace aktivujte program NEKLEPAT CZ (Fronta pacientů) ikonou na pracovní ploše Vašeho PC.
- V případě, že si necháte program nainstalovat od nás, tak za Vás potřebný software nainstalujeme.

Nastavení programu fronty pacientů

ÚVODNÍ NASTAVENÍ PROGRAMU FRONTY



- Stiskněte symbol "☰" v levém horním rohu okna.
- Zvolte možnost "nastavení"

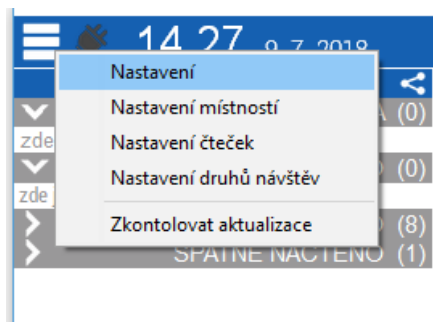

- [Uložiště dat](#)


Cesta k pracovní databázi programu

(Tato hodnota je nastavena automaticky při instalaci programu)

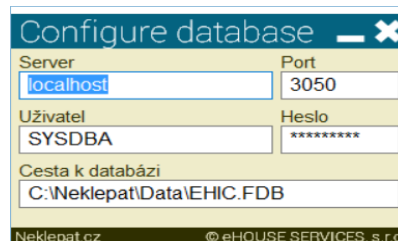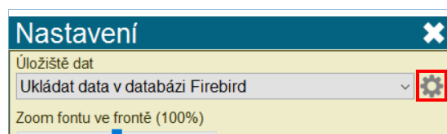


➤ [Typ programu](#)

V případě použití neintegrováné verze programu Fronta pacientů ponechte prázdnou položku, ostatní položky jsou pro uživatele ambulantních programů společnosti CompuGroup Medical (MEDICUS, AMICUS, PC DOKTOR, PC DENT, DENTIST+, TBA SQL).

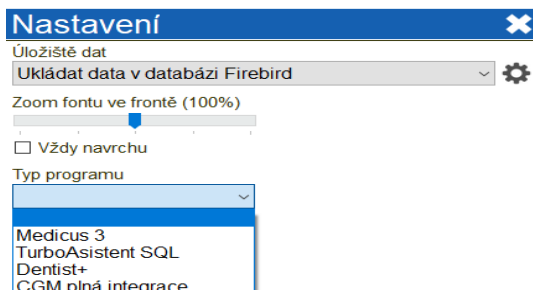



NASTAVENÍ MÍSTNOSTÍ

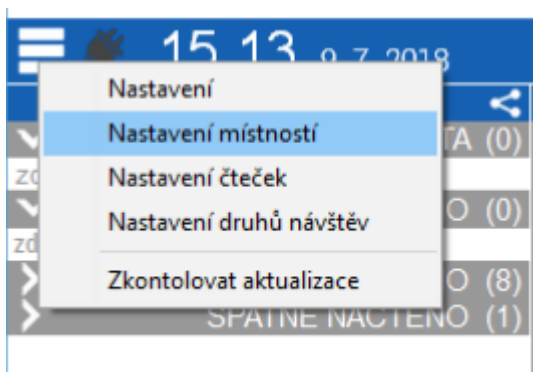


Software ve výchozím nastavení pracuje s 1 místností = výchozí fronta ordinace.

Pro řízené přidělování pacientů na další pracoviště (ordinace) je vhodné/je třeba založit další pracoviště dle potřeb. Toto se provádí prostřednictvím parametru „NASTAVENÍ MÍSTNOSTÍ“.

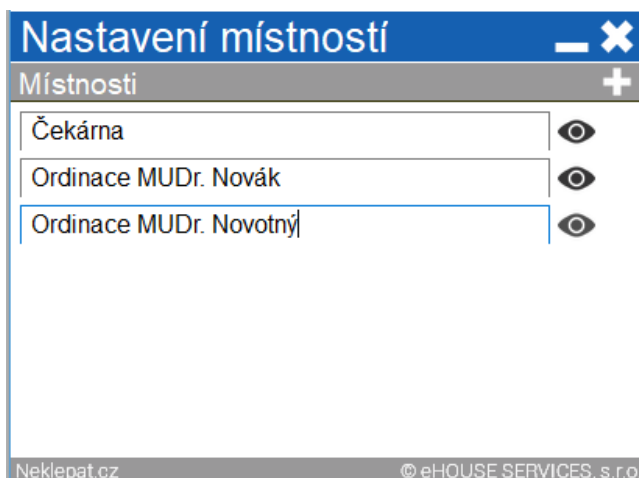


 - Založení nové místnosti (ordinace)

 - Zobrazit/skrýt místnost. Tato volba slouží pro lékaře/sestry na pracovištích, na která jsou distribuováni pacienti z hlavní fronty. Tato volba jim dává možnost nezobrazovat pracoviště (ordinace), které se jich netýkají.

 - Smazat místnost


Nastavení místností slouží pro individuální potřeby ordinace a počet místností není omezený.

Po vytvoření místností není potřeba nic ukládat, ale podokno zavřít  a místnosti se automaticky uloží samy.

Po uzavření podokna pro vytvoření místností se nám vygenerují nová okna (viz. obrázek).

Čekárna	Ordinace MUDr. Novák	Ordinace MUDr. Novotný
FRONTA (0)	FRONTA (0)	FRONTA (0)
zde je prázdkno	zde je prázdkno	zde je prázdkno
ZPRACOVÁNO (0)	ZPRACOVÁNO (0)	ZPRACOVÁNO (0)
zde je prázdkno	zde je prázdkno	zde je prázdkno
ODSTRANĚNO (8)	ODSTRANĚNO (0)	ODSTRANĚNO (0)
ŠPATNĚ NAČTENO (1)	ŠPATNĚ NAČTENO (0)	ŠPATNĚ NAČTENO (0)

NASTAVENÍ ČTEČEK

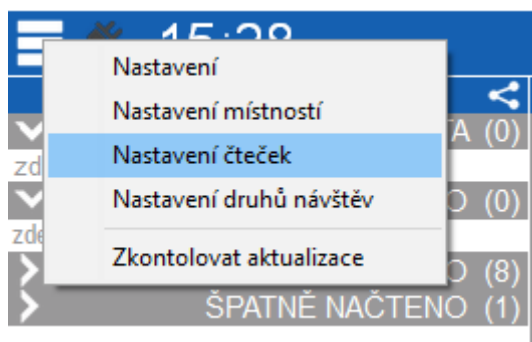

Nastavení čteček

Čtečky

b8:27:eb:f8:31:f2

Nastavení Provozní doba Tlačítka

IP adresa čtečky
192.168.100.2 Test

MAC adresa čtečky
b8:27:eb:f8:31:f2

Název čtečky


Název počítače
DESKTOP-SS2U9OK Toto PC Neaktivní

Výchozí místnost
Čekárna

Neklepat.cz © eHOUSE SERVICES, s.r.o.

Nastavení

- IP adresa je přidělena routerem, popřípadě použijte hostname „neklepat“
- MAC adresa čtečky se vyplní automaticky po připojení čtečky.
- Název počítače se vygeneruje po stisknutí „Toto PC“.
- Výchozí místnost se nastavuje podle potřeby ordinace (odkud se bude generovat výchozí fronta např. recepce nebo čekárna).

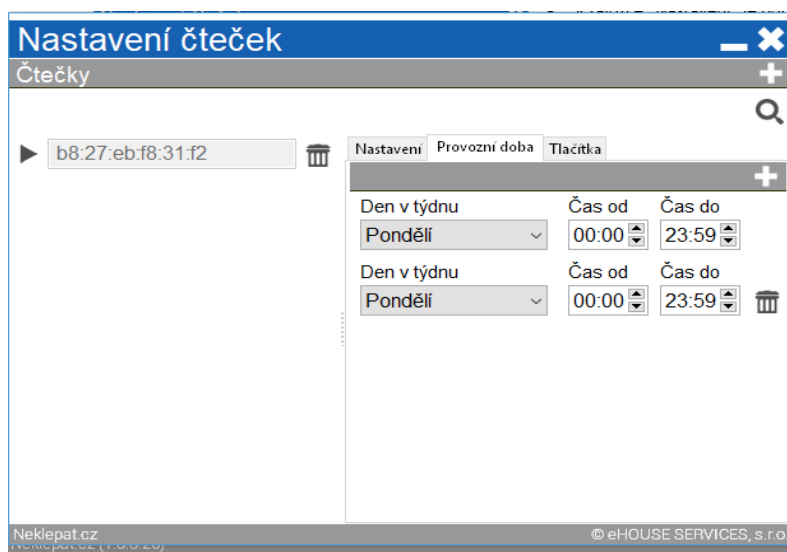


Provozní doba

- V této záložce si lze individuálně nastavit pracovní dobu programu, tzn. kdy bude pro pacienty aktivní. V případě, že tuto záložku nenaprogramujete bude zařízení fungovat bez přestávky i po pracovní době ordinace. Tedy pokud je zařízení online.
- Dobu lze nastavit i vzhledem k nepřítomnosti lékaře nebo sestry, dovolené, odpolední pauze apod.


Tlačítka

- Zde si lze libovolně nastavit důvody návštěvy pacientů nebo jednotlivé části oddělení. Tlačítka lze měnit, přidávat nebo ubírat, dle vlastní potřeby. Maximální počet je 10 tlačítek.
- **Tato záložka slouží pouze pro program verze DISPLAY. U verze BASIC tuto funkci doplňuje sestra nebo recepční.**

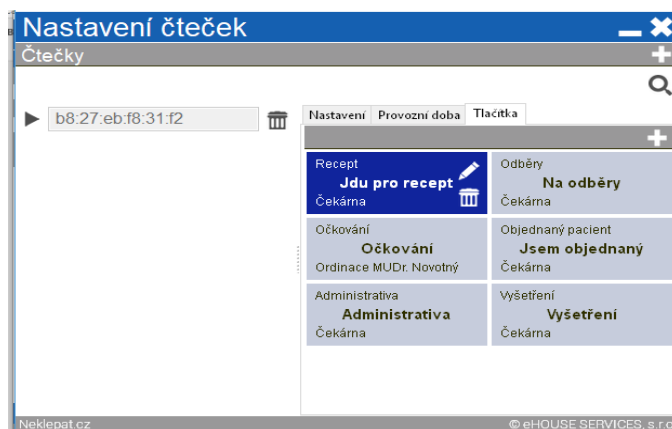

NASTAVENÍ DRUHŮ NÁVŠTĚV

Pro jednotlivé druhy návštěv je možné definovat barevný identifikátor za účelem rozlišení důvodu návštěvy. Jedná se o číselník položek využívaný při konfiguraci tlačítek s důvodem návštěvy pacienta. Doporučujeme vyplnit před konfigurací tlačítek – viz předchozí bod.

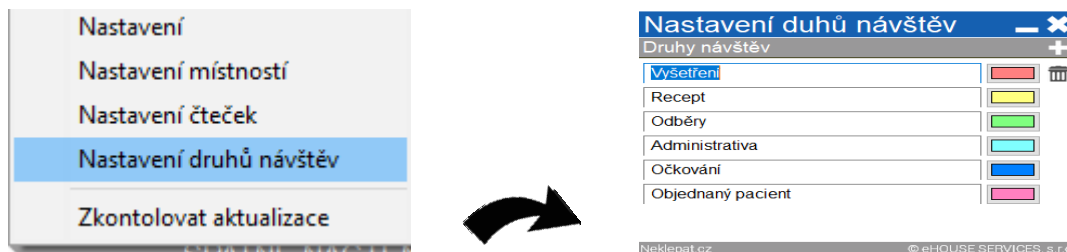

+ - Přidat nový typ návštěvy

KALIBRACE NASTAVENÍ KAMERY

EHIC detail

Celá karta Segmenty

Příjmení
VACEK
VACEK

Jméno
DAVID
DAVID

Datum narození Číslo pojištěnce
05/10/2007 071005
05.10.2007 0710050880

Číslo pojišťovny
11170 - VZP
111

Číslo průkazu Platnost do
80203111706787276702 31/08/2017
80203111706787276702 31.08.2017

Druh návštěvy
Očkování

NeKlepat.cz © eHOUSE SERVICES, s.r.o.

Do zapojeného a připojeného zařízení vložte kartu pojišťovny.

V programu fronty se objeví záznam (záznam zatím není kalibrován = nezobrazuje korektní údaje). Tento záznam otevřete (dvojitě kliknutí myši). V otevřeném formuláři záznamu klikněte pravým tlačítkem myši do prostoru mimo řádky s textem.

Potvrďte volbu: Nastavit vertikální posun

V konfiguračním okně nastavte prostřednictvím šipek parametr Shift tak, aby se jednotlivé segmenty obrázku karty pojišťovny na pozadí posunuly do odpovídajících sekcí. Snažte se jednotlivé sekce umístit co nejlépe na střed.

Po nastavení stiskněte ULOŽIT.

Vertikální kalibrace

Posun 20

Uložit Zrušit

(PACIENT)

**Vyberte položku,
pak vložte kartičku pojišťovny.**



NEKLEPAT CZ
www.neklepat.cz

Korektní zpracování karty je indikované zeleným světlem ve vstupní štěrbině.

Jste v pořadí.
Čekejte na vyzvání sestry.



Je karta jménem vzhůru?
Vysuňte a vyčkejte na bílé světlo. Zasuňte kartu znovu.




Pokud pacient nevloží kartu do zařízení správným způsobem, zařízení indikuje tuto skutečnost červeným světlem.

NÁVOD K POUŽITÍ PROGRAMU FRONTY PACIENTŮ

(Verze BASIC a DISPLEJ)

Záznamy pacientů, kteří vložili (korektním způsobem) kartu zdravotní pojišťovny do zařízení čtečky se zobrazují v programu fronty pacientů na počítači sestry (recepční, lékaře – viz obrázek).

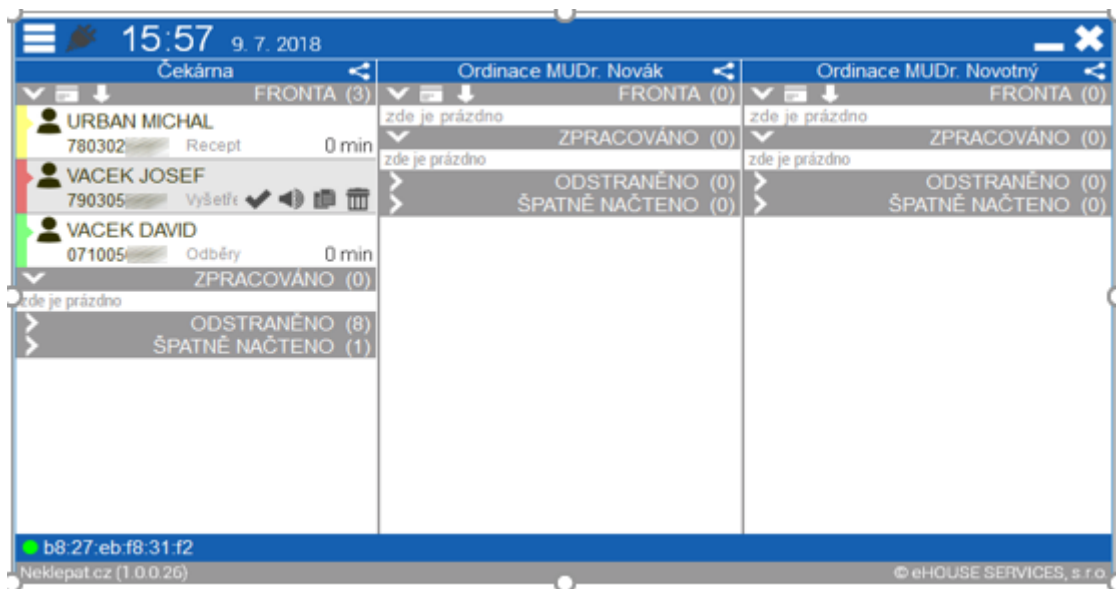

SEZNAM PACIENTŮ ČEKÁRNY

Verze BASIC

Pracovník ordinace (sestra, recepční) rozděljuje pacienty z primární fronty na další pracoviště – tahem myši (viz kapitola **Nastavení místnosti**)

Verze DISPLEJ

Důvod návštěvy si pacient vybere po příchodu do čekárny a program ho sám nasměruje do příslušné ordinace, dle důvodu návštěvy.

ZÁZNAM ČEKAJÍCÍHO PACIENTA

- Záznam čekajícího pacienta se může nacházet ve 4 stavech (platí pro každou ordinaci - místnost):
 - FRONTA = seznam pacientů čekajících na odbavení v lékařské ordinaci. Sestra/recepční pracující s programem fronty může libovolně měnit pořadí pacientů čekajících na vyšetření.
 - ZPRACOVÁNO = pacienti, kteří již byli odbaveni.
 - ODSTRANĚNO = záznamy vyřazené správcem fronty ze seznamu (např. pacient opustil čekárnu apod.)
 - ŠPATNĚ NAČTENO = vznikne v případě, že pacient špatně vložil kartičku do čtecí štrbiny, nebo v případě, že vložil nevhodný doklad.
- Obsah všech front je automaticky aplikací vyčištěn při opětovném spuštění v následujícím dni.
- Význam a ostatních funkcí, symbolů a prvků v záznamu pacienta:
 - ☐ - Otevřít kartu pacienta v ambulantním programu. Pokud jste si pořídili verzi fronty NEITEGROVANOU s programy: Medicus, Turboasistent aj., tato funkce zůstává ve vašem případě neoperativní.

- ✔ - Fce. „Zpracovat“. Pacient byl odbaven v ordinaci – záznam přesunout do stavu ZPRACOVÁNO.
- ♻️ - Zařadit pacienta ze stavu ZPRACOVÁNO zpět do stavu FRONTA.
- 📄 - Kopírovat rodné číslo pacienta. (= ctrl+c rodného čísla). Následně je možné r.č. vkládat do libovolných programů zkratkou ctrl+v.
- 🗑️ - Odstranit záznam pacienta z fronty. Záznam převeden do stavu ODSTRANĚNO.
- 🔍 - Pacient nebyl nalezen v kartotéce.
- 👤 - Indikátor – pacient MUŽ.
- 👩 - Indikátor – pacientka ŽENA.
- ⚠️ - chyba v rozpoznání rodného čísla pacienta

NÁHLED NA DETAIL ZÁZNAMU PACIENTA

Pro zobrazení detailního náhledu na záznam konkrétního pacienta ve frontě klikněte:

- 👤 - Indikátor – pacient MUŽ.
- 👩 - Indikátor – pacientka ŽENA.

nebo

Dvojitě kliknutí myší kdekoliv na konkrétním záznamu.

Detailní náhled obsahuje údaje „vytěžené“ z karty pojišťovny pacienta a fotografii karty pojišťovny (pro případ snížené čitelnosti načítaných údajů).

The screenshot shows a window titled "EHIC detail" with a close button (X) in the top right corner. The window contains the following information:

Celá karta		Segmenty
Příjmení		
VACEK		
VACEK		
Jméno		
DAVID		
DAVID		
Datum narození	Číslo pojištění	
05/10/2007	071005	
05.10.2007	0710050880	
	Číslo pojišťovny	
	11170 - VZP	
	111	
Číslo průkazu	Platnost do	
80203111706787276702	31/08/2017	
80203111706787276702	31.08.2017	
Druh návštěvy		
Očkování		

At the bottom of the window, there is a footer with "Neklepat.cz" on the left and "© eHOUSE SERVICES, s.r.o." on the right.